
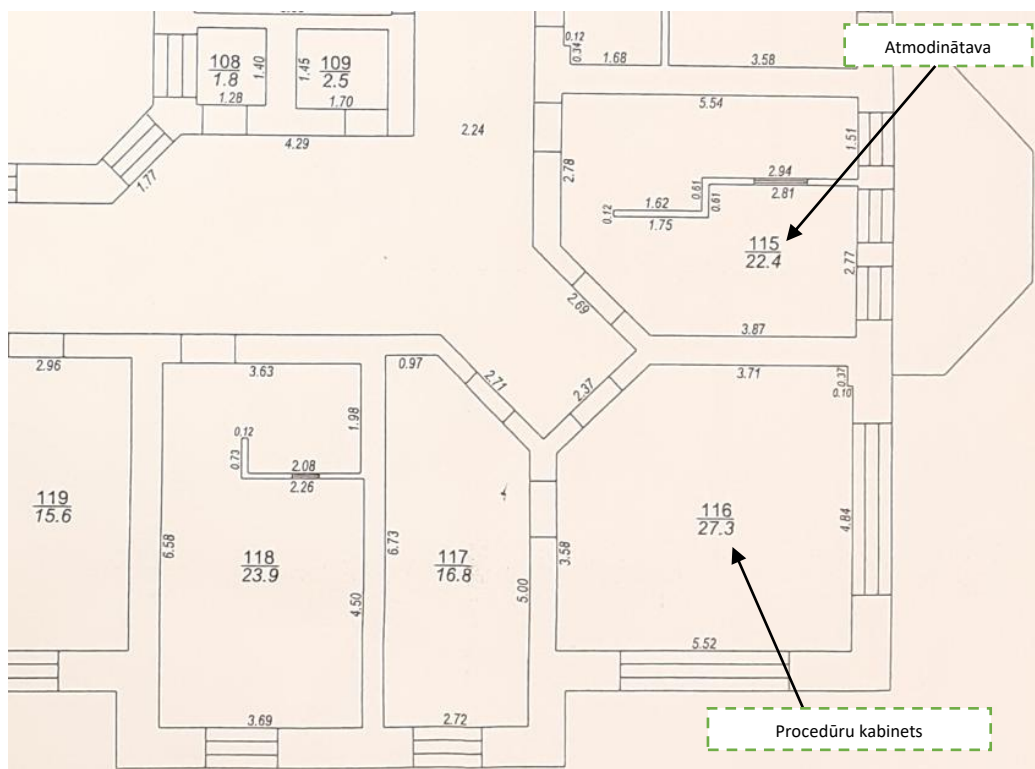


Telpu prasības**23.korpusa – 2.stāvs****Plāns****Atmodinātava**

- **GĀZES PIEVADS**

Uzdevums:

Telpā ir paredzēts izmantot konsoli, kur būs trīs skābekļa ligzdas (provizorisks izvietojums zemāk, zaļā bultā). Skābekļa līnija atrodas blakus kabinetā (provizorisks izvietojums zemāk, zilā bultā). Paredzēts pagarināt skābekļa līniju līdz konsolei. Paredzēt krānu pie griestiem, ar kuru palīdzību nepieciešamības gadījumā var atslēgt skābekļa padevi līdz konsolei (provizorisks izvietojums zemāk, oranžā bultā).

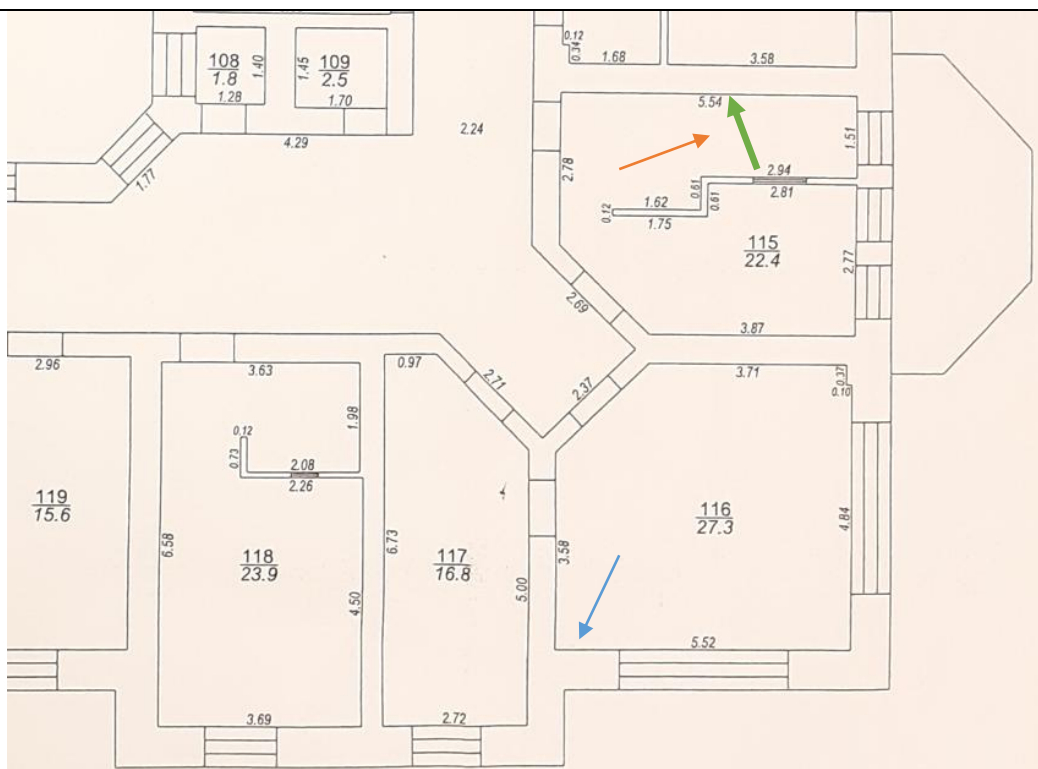

- KONSOLE PIE GULTAS – domāta 3(trim) gultas vietām – Modul teknik kubion (vai ekvivalents) - 1 kts.




Attēlam ilustratīva nozīme. Attēls no esošās nodaļas palātas.

Uzdevums:

Ir paredzētas trīs gultas vietas pacientiem pēc narkozes. Jāparedz atbilstoša konsole. Sienas garums, kur tiks uzstādīta konsole ir 5,5m. Siena arī ir jānostiprina.

Specifikācija

Konsoles konstrukcija ir sadalīta trīs daļās ērtai transportēšanai un uzstādīšanai.

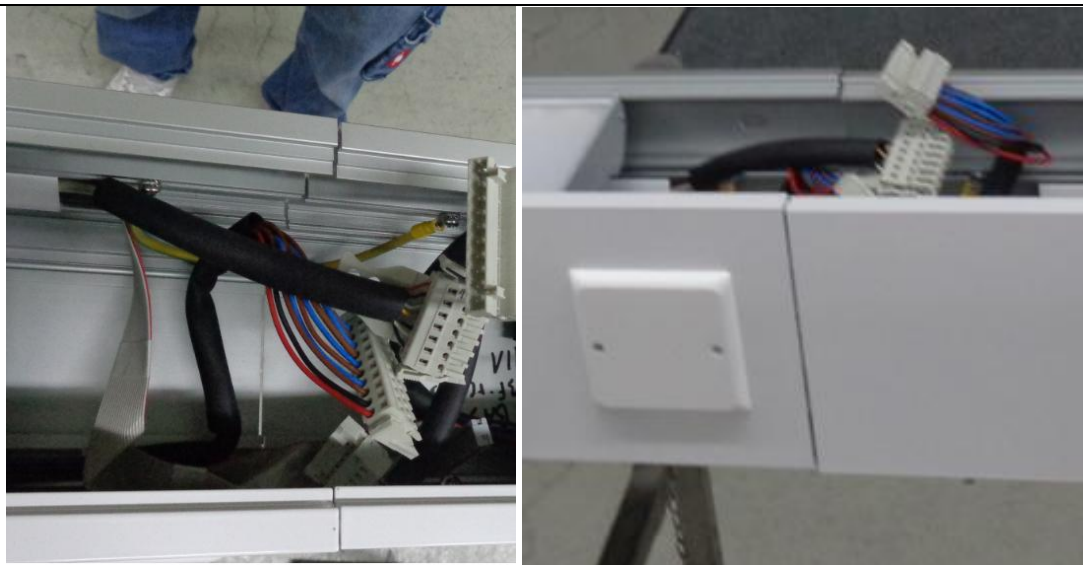

Attēlam ilustratīva nozīme. Attēls iepriekšējās nodaļas būvniecības.

Kopīgais maksimālais konsoles garums ir 5,35m, minimālais 5,25m.

Krāsojums: RAL krāsu katalogs. Krāsa tiek saskaņota pirms sūtīšanas.

Katrai gultas vietai paredzēt:

skābekļa pievads (skābekļa līgda – Skandināvu tipa);

lasīšanas gaisma;

izsaukumu pults, kura būs savietojama ar šīs sadaļas māsas izsaukumu sistēmu;

2x230V pieslēguma kontakti (katram kontaktam ir jāatrodas uz atsevišķas līnijas un sava C16A drošinātāja);

pacienta monitora kronšteins vai stiprinājums (paredzēts Mindray ePM 12, svars 4,8kg);

grozs piederumiem.

Papildus paredzēt:

Nostiprināt sienu. Šobrīd siena ir veidota no režģpša (*paredzamais Modul technik kubion konsoles svars ar monitoriem ir 120kg*);


Skābekļa pieslēgumu;

Māsu izsaukuma pieslēgumu;

Strāvas pieslēgumu;

- AIZSLIETŅI

Paredzēt aizslietņu sistēmas RVS vai ekvivalentas uzstādīšana, kopā trīs;
Stiprināmas pie sienas/griestiem;
Nostiprināt sienu aizslietņu stiprināšanas vietas;
Aizslietņa aizkara augstums vismaz 140 cm;
Aizkars izgatavots no antibakteriāla, ugunsdroša un mazgājama materiāla;
Pieejamas vairākas aizkara krāsas, tostarp vismaz pelēka. Pirms piegādes aizkara krāsa jāaskaņo ar Pasūtītāju;
Izgatavoti no viegli kopjamiem un pret ārstniecības iestādēs lietotajiem dezinfekcijas līdzekļiem izturīgiem materiāliem.

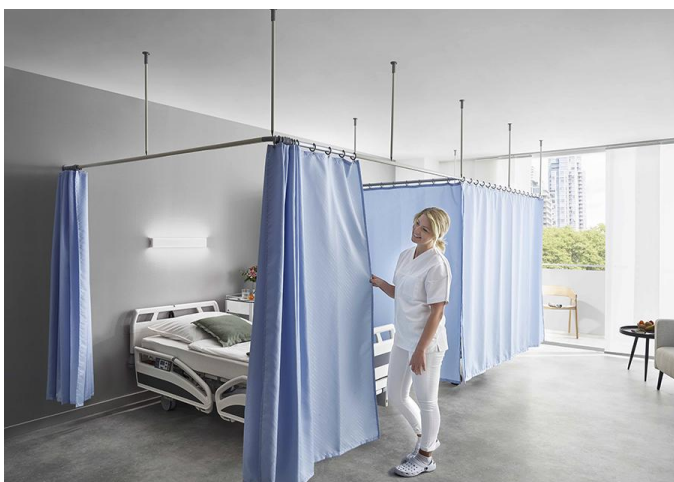

Attēlam ilustratīva nozīme.

- **MĀSU IZSAKUMA SISTĒMA**

Jābūt savietojamai ar Modul teknik kubion konsoli. Māsu izsaukuma sistēma izvietota virs katras pacientu gultas (jābūt trīm adresēm), Modul teknik kubion konsolē ar iespēju izsaukt māsu gan uz konsoles, gan ar pults palīdzību. Ar pults palīdzību ir jāspēj ieslēgt un izslēgt gaismu uz konsoles. Izsaucot māsu, procedūru kabinētā jāiedegas gaismas indikatoram ar skaņu, lai personāls redz, ka pacientam ir vajadzīga palīdzība. Pie ieejas atmodinātavā ir jāizvieto māsu izsaukuma sistēmas panelis uz kura medicīnas māsa atslēdz izsaukumu.


Procedūru kabinets

GĀZES IZVADI

Uzdevums:

Telpā ir paredzēts izmantot narkozes aparātu GE Aespire View, kuram ir vajadzīgs: saspiestais gaiss, skābeklis un gāzes izvads (provizoriski tiks izmantots sevufloorāns). Saspiestā gaisa līnija

stomatoloģijas iekārtām (6-8 bar) atrodas gaitenī (provizoriskais izvietojums zemāk, zilā bultā), skābekļa līnija atrodas pašā kabinetā (provizoriskais izvietojums zemāk, zaļā bultā), bet gāzes evakuācijas nav. Paredzēts pagarināt skābekļa/saspiestā gaisa līnijas un uzstādīt aktīvo gāzes evakuāciju.

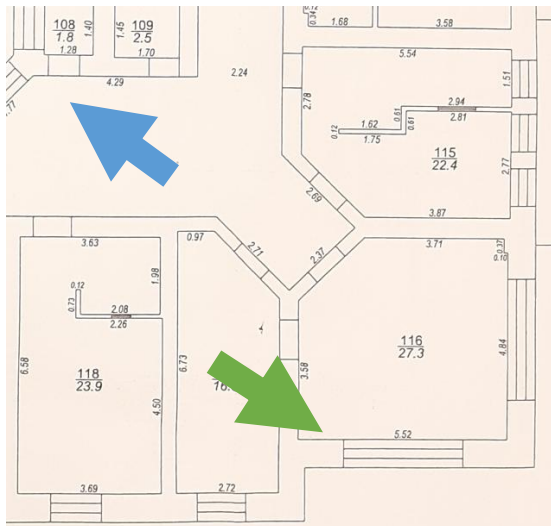

Paredzēt:

Saspiestais gaiss:

Paredzēt vienu V/A Skandināvu tipa rozeti sienā (provizoriskais izvietojums zemāk);



Paredzēt virs griestiem uz rozeti reduktoru 5 bar.

Skābeklis:

Paredzēt vienu V/A Skandināvu tipa rozeti sienā (provizoriskais izvietojums zemāk);



Aktīvais gāzes izvads:

Paredzēt vienu V/A FORANO AGSS gāzes evakuācijas ligzdu (provizorisks izvietojums zemāk);



Paredzēt aktīvo gāzes evakuāciju fasādē